


ALINCO

取扱説明書

フットエアー 極

品番

MCB072

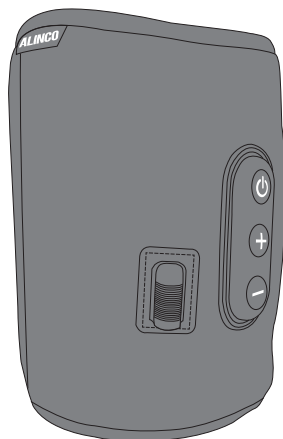

WEBカタログ



目次

警告・注意	1～4	製品仕様	1 1
各部の名称	5	MEMO	1 2
使用前の準備	6	保証書	裏表紙
使用方法	7～8		
オートオフ機能について、使用上の注意、 お手入れ方法・保管および廃棄について	9		
故障かな?と思う前に	1 0		

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- 本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起らないよう、記載内容に従って正しくお使いください。
- お読みになった後も、必要な時にいつでも調べられるよう、大切に保管してください。
- 改良のため、デザイン、仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。
- 無断の複製は固く禁じます。

警告・注意

安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の警告及び注意内容は、危険の度合によって次の2段階に分けています。
表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に従ってご使用、点検を行ってください。

警告

誤った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性がある内容です。

注意

誤った取り扱いをすると、軽傷を負ったり、物的損害が発生する可能性がある内容です。

絵表示の意味



必ず指示に従ってください。



絶対に行わないでください。



分解をしないでください。



確認をしてください。

本書記載の警告及び注意事項を遵守されずにご使用されて生じた、いかなる事故につきましても、弊社としては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、本書記載の警告及び注意事項に該当すると思われる場合は本製品の使用はせず、ただちに弊社カスタマーサービス課へお問い合わせください。

●また、各ページには安全にご使用いただくための注意点も表記しております。よくお読みいただき、記載している内容を十分ご理解の上、ご使用ください。

使用上の警告・注意事項

警告



- 本製品は一般家庭用機器です。絶対に業務用として使用しないでください。
- 本製品は、安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)が単独で機器を用いることを意図していません。
- 本製品はふくらはぎにのみ使用できます。ふくらはぎ以外の部位には絶対に使用しないでください。
- 必ずイスや床に座った状態でご使用ください。立ち上がった状態では使用しないでください。
- 眠気がするとき、または眠りながらの使用はしないでください。
- 犬や猫などの動物に使用しないでください。機器の破損や重大な事故を引き起こす原因になります。
- 直接骨部にあたる部位には使用しないでください。
- 車の運転中に使用しないでください。
- 本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。

- 本製品や電源コードの上に座ったり物を置いたりしないでください。機器の破損や重大な事故を引き起こす原因になります。
- 本製品を装着した状態での激しい動きはおやめください。
- お子様には使用させないでください。保護者の方は、お子様が本製品を玩具として使用しないように十分ご注意ください。また、動物などを近づけないようご注意ください。
- 他の製品と本製品を同時に使用しないでください。気分が悪くなるなど体調不良を起こすおそれがあります。
- 本体生地が破れた状態では使用しないでください。ケガや事故のおそれがあります。破れた場合は使用を中止し、弊社カスタマーサービス課までご連絡ください。
- 本製品を直接肌にあてないよう、必ず衣類などを着用してご使用ください。



● 身体の不自由な方は、必ず介護の方の付き添いの上で使用してください。



● 本製品の連続使用時間は最大10分です。10分以上の連続作動はお止めください。また、ご使用後1時間はご使用にならないでください。故障の原因になります。

● 全てのコードは容易に離脱しないように、正しく接続してください。

● ACアダプターは、指定された付属の専用ACアダプターを使用してください。異なるアダプターの接続は、火災や故障の原因になります。

● 使用中・使用後に気分が悪くなったり、めまいがする、動悸が激しくなったなど、身体に異常を感じたときは直ちに使用をやめ、医師にご相談ください。

● 次に該当する方は本製品を使用しないでください。

・医師が使用を不適当と認めた方

例) 血栓[血塞]症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など

・骨折・整形などで脚部にメタル・シリコン・プラスチックなどの埋め込み手術を受けた方

・交通事故などにより脚部に後遺症がある方

● 医師の治療を受けている方や、下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。

○ ベースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人。

○ 悪性しゅよう(腫瘍)のある方。

○ 心臓に障害のある方。

○ 温度感覚喪失のある方。

○ 妊娠初期の不安定期又は出産直後の方。

○ 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある方。

○ 脚部の皮膚に創傷のある方。

○ 安静を必要とする方。

○ 体温38℃以上(有熱期)の方。

例1 急性炎症症状【けん(巻)怠感、悪寒、血圧変動など】の強い時期。

例2 衰弱しているとき。

○ 神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、及び敏感肌の方。

○ 血行障害、毛細血管拡張症、血圧に異常のある方。

○ 使用部位にケガをしている方。

○ かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する方。

○ 脚部の手術を行った方。

○ その他、医療機関で治療中の方。

上記以外に身体に異常を感じているとき



注 意



● 本製品は必ず屋内でご使用ください。

● 日本国内でご使用ください。



● ご使用前には、ボタン、タイマーが正常に作動することを確認してください。本製品に故障や破損など異常が発見された場合には、使用しないでください。



● 本製品をテレビやラジオの近くでご使用されますと、テレビの画像やラジオの音声にノイズ(雑音)が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。



● 直射日光やストーブなどの火気・熱気の近くや、浴室など湿度の高い場所での使用・保管はしないでください。

保管・お手入れについての警告・注意事項



警 告



● 使用時以外は専用ACアダプターをコンセントから抜き、保管場所は本製品でつまずがけないような場所に置き、特に小さいお子様が勝手に触ることのないよう、必要に応じて梱包等を施してください。



● 本体・付属品などは、次の使用に支障のないように清浄にし、湿気の少ないところに整理・保管をしてください。

● 専用ACアダプターのコードは、ねじれをほいよう使用・保管をしてください。

● 小さなお子様や、取扱説明書の内容が理解できない方がお一人で機器に触れ、誤った操作をしないように十分ご注意ください。誤った操作は事故の原因になります。

● 直射日光が当たる場所や炎天下の車内・暖房器具の近くなど高温になる場所、浴室などの湿度が高い場所には保管しないでください。

● お手入れの前には、専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。感電のおそれがあります。

⚠ 注意

- 長期保管され、再び使用される場合は、本書の注意及び警告事項を再確認の上、本製品が正常に、かつ安全に作動することをご確認ください。

- 本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的に汚れ等を拭きとってください。その際、シンナー系や酸系の強い洗剤でのお手入れはお避けください。

- ほこりの多い場所での使用・保管はしないでください。
- 直射日光の当たる場所や湿気の多い場所、熱器具の近く、屋外には放置しないでください。故障や感電・漏電・発火の原因になります。
- 寒い場所から暖かい場所に移動したり、室温が急激に上がった直後は、内部が結露し、故障の原因となるため、大きな温度変化のある場所での保管や使用はしないでください。
- 雷が鳴り始めたときは、直ちに充電を中止してください。火災や感電の原因となる場合があります。

電動機器の警告事項

⚠ 警告

—— 本製品はAC100V電源を使用します ——

- ご使用後は必ず電源がOFFになっているか確認し、専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ご使用にならないときや、雷が鳴り出したときには、専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 停電のときには直ちに使用を中止し、専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 専用ACアダプターは最後まで確実に差し込んでください。差し込みが不十分な場合、感電・ショート・発火の原因になります。
- 本製品に故障や破損など異常が発見された場合には、直ちに使用を中止してください。

- 室温が10℃以下・35℃以上の状態では使用しないでください。正常に作動しなくなるおそれがあり、製品の劣化も早めます。
- 本製品にタオルや毛布などをかけた状態で通電させないでください。
- 本製品を水または他の液体に浸したりしないでください。また、浴室などの湯気・湿気の多い場所での使用・保管はしないでください。故障や感電・漏電・発火の原因になります。

- コンセントから専用ACアダプターを抜き差しする時には、絶対に濡れた手で触ったり、専用ACアダプターのコードを引っ張ったりせず、必ず専用ACアダプター本体をつかんでコンセントから抜いてください。また、専用ACアダプターのコードやプラグが傷んだり、差し込みがゆるんだ状態のままでの使用はしないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。
- 使用中及び本製品の移動・保管の際には、専用ACアダプターのコードの上に重量物や本製品を置かないようにご注意ください。断線や短絡・発火の原因になります。
- ACアダプターは、指定された付属の専用ACアダプターを使用してください。

- ご使用の際、専用ACアダプターのコードは束ねず、ねじれをほどこして使用してください。また、コードにストレスがかかるような状態（コードが引っ張られたり、無理に曲げたり）で使用しないでください。
- 本製品を落下や冠水させて破損した場合、絶対に使用せず弊社カスタマーサービス課にご連絡ください。
- 本製品に故障や破損など異常が発見された場合には、直ちに使用を中止し、専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 本製品の分解・改造は行わないでください。機器が故障した場合、専用ACアダプターが破損した場合には、ご自身で修理などはせず、弊社カスタマーサービス課までご連絡ください。弊社以外での修理は行わないでください。


- 保管の際、専用ＡＣアダプターのコードを、アダプター本体や本製品などに強く巻きつけたりしないでください。断線や短絡・発火の原因になります。

- 万一、故障その他のトラブルが発生した場合には、弊社カスタマーサービス課までご相談ください。
- お買い上げ日より１年を過ぎた製品は、有償にて点検サービスも行っております。
- 本製品を廃棄するときは、お住まいの各自治体の指導に従って処分してください。
- この取扱説明書及び保証書は、大切に保管されますようお願いいたします。紛失された場合、再発行はお受けしかねることがあります。


各部の名称

梱包をあけましたら電源を入れる前に、必ず付属品が揃っているかご確認ください。

■ 本体

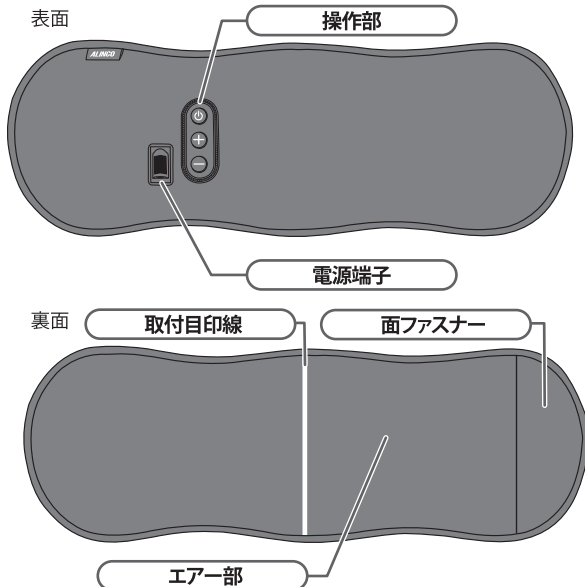


■ 操作部の名称

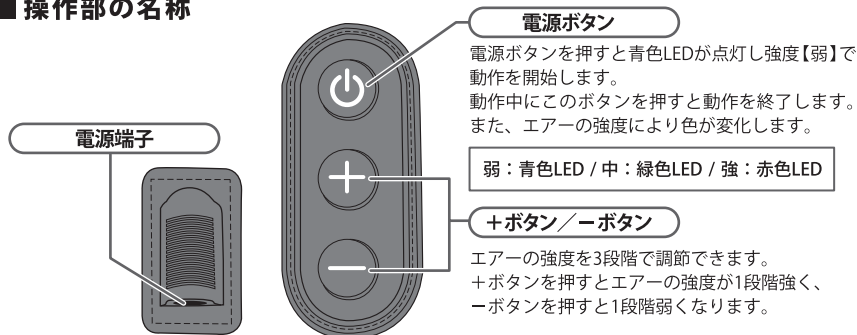

■ 付属品

・専用ACアダプター

型式：IVP0500-1000P

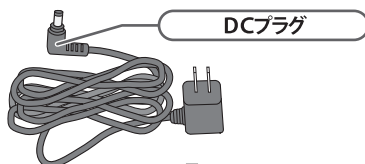

使用前の準備

1 本体に破れなどがないことを確認する



⚠ 警告

- ご使用前には必ず、本体に破れや破損がないか確認してください。
- 破れや破損などがある場合には使用せず、弊社カスタマーサービス課までご連絡ください。

2 専用ACアダプターのDCプラグを本体の電源端子に接続する

⚠ 警告

- 専用ACアダプターは、コンセントの奥まで、DCプラグは電源端子の奥まで、しっかり差し込んで下さい。
- 本製品付属の専用ACアダプター以外は使用しないでください。故障や感電、漏電、発火の原因になります。

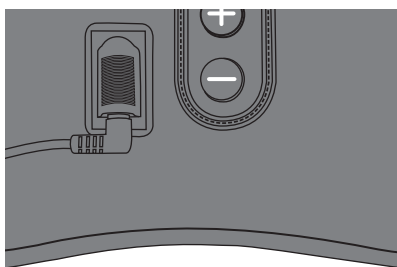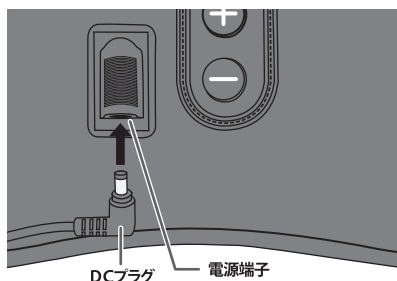

3 専用ACアダプターをコンセントに差し込む

⚠ 注意

- 電源コードは束ねたり巻きつけたまま使用しないでください。
- テレビ、ラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所でご使用ください。雑音の原因になることがあります。

4 ㊦電源ボタン・⊕ボタン・⊖ボタンが正常に動作するか確認する

初めて使用するときや、しばらく使用していなかった場合などは、使用前に機器が正常に動作するかどうか確認してください。

※電源をオンにすると、強度【弱】(電源ボタン青色LED点灯)でスタートします。




使用方法

1 電源を切った状態で、右図のように本体をふくらはぎに当てるように本体を装着する





ポイント

取付目印線をふくらはぎの中央に合わせ、本体を装着してください。そうすることで、正しい位置で効果的なケアができます。

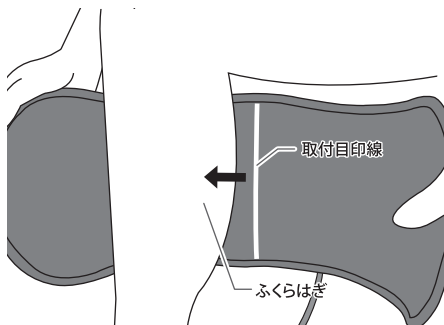

⚠ 注意

- ふくらはぎ以外の部位には使用しないでください。
- 素肌に直接つけて使用すると、使用後に跡が付く場合がありますので、ズボンや長めの靴下をはいて使用してください。
- 立った状態で使用しないでください。必ず椅子や床に座って使用してください。

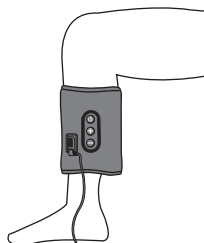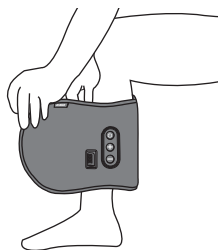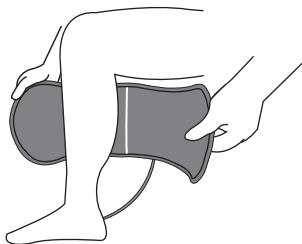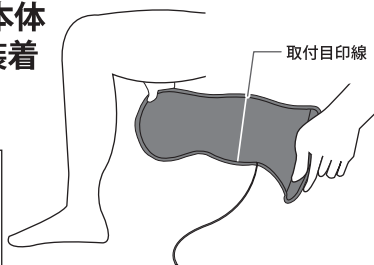

2 ㊦ 電源ボタンを押して動作を開始する

停止中に電源ボタンを押すと、強度【弱】(電源ボタン青色LED点灯)で動作を開始します。

※電源をオンにすると、強度【弱】(電源ボタン青色LED点灯)でスタートします。

⚠ 警告

- ふくらはぎ以外の部位には使用しないでください。
- 動作中痛みを感じたとき等の緊急時は、電源ボタンを押すか、DCプラグを抜いてください。空気が抜けて足から本製品を外しやすくなります。

3 ㊦ ㊧ ボタン・㊧ ボタンを押してエアーの強度を調節する

㊦ボタン・㊧ボタンを押すことでエアーの強度を調整できます。

最初は強度【弱】(電源ボタン青色LED点灯)から使用し、慣れてきたらエアーの強度を調整したり、巻きの強さを変えて強度を調整してください。



4 ㊦ 電源ボタンを押して動作を停止する

動作中に電源ボタンを押すと、動作を終了します。

⚠ 警告

- 使用終了後はACアダプターを接続したままにしないでください。絶縁劣化により感電、漏電、火災の原因になります。
- ACアダプターを抜く際は、コード部分を引っ張って抜かず、DCプラグ部分を持って抜いてください。
- 電源コードを巻き付けたまま使用しないでください。発煙、発火の原因になります。

オートオフ機能について・使用上の注意

■オートオフ機能について

開始後10分経過すると、自動的に動作を停止します。(LEDランプはすべて消灯)

⚠ 注意

- 開始後10分経過すると自動タイマーが作動し、自動的に動作が終了します。動作終了後、エアーが自動で抜けます。
- 10分以上の使用はしないでください。
- 内部駆動部の加熱などによって安全装置が働いた場合、1時間程度時間を置いて本体内部の温度を下げってから使用してください。

■使用上の注意

★痛みを我慢しながらの使用はしないでください。

- 人により必要な使用時間・強度は異なります。
(エアーの強度は、本体の足への巻きの強さによっても変わります。)
- 痛みを我慢して続ける使用は効果が無いばかりか筋肉や皮膚を痛めるなど逆効果にもなります。
- 痛みを少しでも感じた場合には、すぐに使用を中止してください。

⚠ 注意

- アクセサリーなど硬いものをつけた状態で使用しないでください。ケガや事故のおそれがあります。
- 本体の上に座ったり物を置いたりしないでください。機器の破損や重大な事故を引き起こすおそれがあります。
- 眠気がするとき、また、眠りながらの使用はしないでください。事故を引き起こすおそれがあります。

お手入れ方法・保管および廃棄について

■お手入れ方法(本製品を長期にわたりご使用いただくため、1ヶ月ごとに清掃・点検・保守を行ってください。)

- お手入れの前には、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品を長期にわたり清潔・快適にお使いいただくため、定期的に汚れなどを拭き取ってください。また、汚れなどが落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液で拭き取ってください。このとき、シンナー系や強い酸性の洗剤でのお手入れはおやめください。シミや変形の原因になります。

■保管および廃棄について

- 小さなお子様の手の届くところに置かないでください。
- 温度、湿度の高いところや、直射日光の当たるところに置かないでください。
- 廃棄は必ず各自自治体の取り決めに従ってください。
- ご使用前には必ず保護カバーが破れていないか点検を行ってからご使用ください。保護カバーを取り外した状態や破れた状態では絶対に使用しないでください。



故障かな？と思う前に

症 状	チェック箇所
●動かない	➡ ○連続したボタン操作をしていませんか？ (続けてボタン操作をすると受け付けない場合があります。少し間隔を置いてから次の操作を行ってください。) ○専用ACアダプターのプラグがコンセントに差し込まれていますか？ ○長時間の使用で本体が熱くなっていますか？ (1時間程度時間をおいて本体内部の温度を下げてから使用してください。)
●停止する	➡ ○開始後10分経過していませんか？自動タイマーが作動しています。
●停止しない	➡ ○電源ボタンを押しても、すぐには止まりません。 エアーが抜けてから自動停止します。

お問い合わせは **アルインコ株式会社** カスタマーサービス課

 **0120-30-4515** 受付時間 10:00～12:00、13:00～16:00（土・日・祝祭日、弊社休業日を除く）

製品仕様

販 売 名	フットエアー 極
品 番	MCB072
製 品 サ イ ズ	W600×D200×T30mm
製 品 質 量 (重 量)	約340g(ACアダプター含む)
定 格 電 源	AC100V (50/60Hz)
消 費 電 力	3W
定 格 時 間	10分
対 応 サ イ ズ	ふくらはぎ周り 約30cm～50cm
主 な 材 質	ポリエステル、PVC (ポリ塩化ビニル)、シリコーン
付 属 品	専用ACアダプター (型式：IVP0500-1000P)
専用ACアダプター定格	入力：AC100V-240V (50/60Hz) 0.5A 出力：DC5V/1A
製 造 販 売 業 者	アルインコ株式会社
住 所	大阪府高槻市三島江1-1-1
生 産 国	中国

修理・
アフターサービスの
ご案内

 **アルインコ株式会社**
フィットネス事業部 カスタマーサービス課
フリーダイヤル  **0120-30-4515**

受付時間 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 16:00 (土・日・祝祭日、弊社休業日を除く)

※故障や異常が発生した場合、まずは本書P10「故障かな?と思う前に」をご確認ください。

左記以外受付

F A X : 072-678-6410

E-mail : fcs-syuuri@alinco.co.jp

F A X又はメールでのお問い合わせの場合、回答に時間を要する場合がございます。予めご了承ください。

この商品の
WEBページはこちら

