

ALINCO

品名

マッサージチェア 2025

品番

MSC2025

取扱説明書



安全にご使用していただくために

取扱説明書をよくお読みいただき、内容を十分理解された上でご使用ください。

- 改良のため、デザイン・仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。
- 無断の複製は固く禁じます。

ご使用前に必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の組立と使用上の注意及び警告事項について詳しく記載しています。

本製品をご使用になる前には、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起らないよう、記載内容に従って正しくお使いください。また、お読みになった後も、必要なときにいつでも調べられるよう、すぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。なお、**本製品のご使用制限は体重100kg以下・連続使用時間15分までとなります。**(機器の連続使用によって熱を帯びた部品を冷却し、故障を防止するため、また、機器を末永くご使用いただくため、連続使用後、約1時間は本製品を休ませてください。)

INDEX

安全のため
必ず守っていただくこと
警告・注意事項

各部の名称

設置
本体の開き方・
折りたたみ方
リクライニング方法

ご使用方法

お手入れ方法など
故障かな?と思う前に

警告・注意事項

安全のために、必ずお守りください。

取扱説明書の警告及び注意内容は、危険の度合によって次の2段階に分けています。
表記されている内容をよく理解していただき、取扱説明書に従った使用法で点検・運動をおこなってください。

⚠ 警告

記載されている内容を守らなければ、死亡または重傷などを負うことが想定される内容です。

絵表示の意味



必ず指示に従ってください。



絶対に行わないでください。



分解をしないでください。



確認をしてください。

本書記載の警告及び注意事項を遵守されずにご使用されて生じた、いかなる事故につきましても、弊社としましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、本書記載の警告及び注意事項に該当すると思われる場合は本製品の設置及び使用はせず、ただちに弊社カスタマーサービス課へお問い合わせください。

●各ページには安全にご使用いただくための注意点も表記しております。よく読みいただき、記載している内容を十分ご理解の上、ご使用ください。

使用上の警告・注意事項

⚠ 警告

- ⚠ 本製品は一般家庭用・マッサージ器です。絶対に業務用として使用しないでください。
- ⊘ 直接骨部にあたる部位には使用しないでください。ケガや事故のおそれがあります。
- ⊘ 本製品のすき間には絶対に手・足などを入れないでください。ケガや事故のおそれがあります。
- ⊘ 本製品の座面以外の部分に座ったり物を置いたりしないでください。機器の破損や重大な事故を起こす原因になります。
- ⚠ 本製品は1人用です。2人以上で使用しないでください。ケガや事故のおそれがあります。
- ⊘ 小さなお子様には使用させないでください。保護者の方は、お子様が本製品を遊具として使用しないよう十分注意してください。また、動物などを近づけないよう注意してください。
- ⊘ 本製品の座部に立ったり、無理に体重をかけたりする使用はしないでください。
- ⊘ 他の治療器と同時に使用しないでください。気分が悪くなるなど体調不良を起こすおそれがあります。
- ⊘ 眠気がするとき、または眠りながらの使用はしないでください。
- ⚠ 使用前には本製品の点検を行い、異常がある場合は使用しないでください。
- ⊘ 本体カバーを故意に外したり、破いたり、切り取ったりしないでください。カバーが外れたり破れた状態で使用すると、衣服や髪が巻き込まれケガのおそれがあります。
- ⊘ 破損している電源コードや電源プラグを使用しないでください。感電やショート・発火の原因になります。
- ⊘ 電源プラグは確実に根元まで差し込み、ゴミを付着させないでください。感電やショート・発火の原因になります。
- ⚠ 使用前に保護カバーの破れを点検して、保護カバーが破れた場合は使用を中止して、勝手に修理などせず弊社カスタマーサービス課までご連絡ください。
- ⚠ 本製品の連続使用時間は15分以内です。15分以上の連続使用はしないでください。また同一箇所への連続使用は5分以内にしてください。
- ⊘ 医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。
例) 血栓(そく(塞)栓)症、重度の動脈(りゅう(瘤)、急性静脈(りゅう(瘤)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含むなど
- ⚠ 本製品の使用体重制限は最大100kgです。体重が100kgを超える方はご使用はしないでください。ご使用中、本製品が破損するおそれがあり、重大な事故を引き起こす原因になります。

⚠ 注意

記載されている内容を守らなければ、軽傷を負うかまたは物的損害の発生が想定される内容です。

- ⚠ ACアダプターは、指定された付属の専用ACアダプターを使用してください。異なるアダプターの接続は、火災や故障の原因となります。
- ⚠ 医師の治療を受けている方や、下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。
 - [1] ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植え込み型医用電気機器を使用している方。
 - [2] 悪性しゅよう(腫瘍)のある方。
 - [3] 心臓に障害のある方。
 - [4] 温度感覚喪失が認められる方。
 - [5] 妊娠初期の不安定期又は出産直後の方。
 - [6] 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある方。
 - [7] 皮膚に創傷のある方。
 - [8] 安静を必要とする方。
 - [9] 体温38℃以上(有熱期)の方。
 - 例1) 急性炎症症状【けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など】の強い時期。
 - 例2) 衰弱しているとき。
 - [10] 骨粗しょう(鬆)症の方、せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性【とう(疼)痛性】疾患の方。
 - [11] 脚にケガをしている方。 [12] 腱鞘炎の方。
 - [13] かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する方。
 - [14] せきつい(脊椎)に異常のある方、又は背骨が左右に曲がっている方。
 - [15] その他、医療機関で治療中の方。
 - [16] 使用しても効果が表れない方。上記以外に身体に異常を感じているとき。
- ⚠ 使用中・使用後に気分が悪くなったり、めまいがする、動悸が激しくなったなど、身体に異常を感じたときは直ちに使用をやめ、医師にご相談ください。
- ⚠ 身体の不自由な方は、必ず介護の方の付き添いの上で使用してください。
- ⚠ 本製品を直接肌にあてて使用しないでください。必ず衣類などを着用しご使用ください。
- ⊘ リクライニングするときは、必ず周囲(本体の前部、後部、側部、下部など)に人やペット、物がないことを確認してください。事故やケガ、家財を傷めるおそれがあります。
- ⊘ リクライニングするときは、下記に記載の本体の隙間に手、指、脚や頭を入れないようにしてください。事故やケガのおそれがあります。
 - ・脚部の下側 ・本体の後側 ・本体の前側
- ⚠ 使い始めは、弱い刺激のマッサージから始めてください。

⚠ 注意

- ⚠ 本製品は必ず屋内で使用してください。
- ⚠ 日本国内で使用してください。

警告・注意事項

- OK? 使用前には、タイマー、コントローラーの各ボタンが正常に作動するか確認してください。本製品に故障や破損など異常が発見された場合には、使用しないでください。
- ! 水平な場所で使用してください。
- OK? 使用前に、本体（前部、後部）に異物がはさまっていないか確認してください。事故やケガのおそれがあります。
- ! 本製品をテレビやラジオの近くで使用されますと、テレビの画像やラジオの音声にノイズ（雑音）が入ります。その際には、テレビやラジオ又はそれらのアンテナから離れた場所へ移動させてください。
- ! 固く水平で安定した場所に設置してください。不安定な場所に設置すると、本体が倒れ、事故やケガ、故障の原因になります。
- ! キャスターで本製品を移動する際は、周囲の障害物を取り除き、マットなどを敷いてから、ゆっくりと移動してください。床やたたみ、周囲の家財などを傷つける原因になります。
- ⊗ 直射日光やストーブなどの火気・熱気の近くでの使用・保管はしないでください。
- ⊗ ほこりの多い場所での使用・保管はしないでください。
- ⊗ ストーブなどの近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しないでください。またホットカーペット等の暖房器具の上で使用しないでください。火災の原因になります。
- ⊗ リクライニングしているときは、脚部や背もたれ部の上部に乗らないでください。利用者や本体が転倒して、事故やケガのおそれがあります。
- ⊗ リクライニングしているときには、乗り降りをしてしないでください。利用者や本体が転倒して、事故やケガのおそれがあります。
- ⊗ 使用中は眠らないでください。
- ⊗ 人や物を乗せて移動しないでください。故障やケガのおそれがあります。
- ⊗ マッサージの目的以外には使用しないでください。故障や事故の原因になります。
- ⊗ フローリングやたたみなど傷つきやすい床面で、引きずったりキャスターを使って移動しないでください。床面に傷がつくおそれがあります。
- ⊗ 本体を倒したり、強い衝撃を与えないでください。故障やケガのおそれがあります。
- ⊗ 頭部、腹部には使用しないでください。また、もみ玉部に手や足をはさまないでください。体調不良やケガのおそれがあります。
- ⊗ 腰、尻、ももをマッサージするときは、衣服（ズボンなど）のポケットに硬い物を入れたまま使用しないでください。事故やケガのおそれがあります。
- ⊗ マッサージするときは、ピアス・イヤリング・ネックレス・襟巻きなどの装飾品をつけたまま使用しないでください。事故やケガのおそれがあります。

保管・お手入れについての警告・注意事項

! 警告

- ! 使用時以外は専用 A C アダプターをコンセントから抜き、本体、付属品は次回の使用に支障がないように清浄し、湿気の少なく、直射日光が当たらない場所で整理、保管してください。
- ! お手入れ前には、専用 A C アダプターをコンセントから抜いてください。感電のおそれがあります。
- ! 専用 A C アダプターのコード類はねじれをほどこして保管してください。
- ! 折たたみ時には手指などを挟まないよう注意してください。

- 使用しても効果が現れないときは、医師又は専門家にご相談ください。
- 万一、故障その他のトラブルが発生した場合には、弊社カスタマーサービス課までご連絡ください。
- お買い上げ日より 1 年を過ぎた製品は、有償にて点検サービスもおこなっております。
- 本製品を廃棄するときは、お住まいの各自治体の指導に従って処分してください。
- この取扱説明書及び保証書は、大切に保管されますようお願いいたします。紛失された場合、再発行はお受けしかねることがあります。

! 注意

- OK? 長期間保管され、再び使用される場合は、本書の注意及び警告事項を再確認の上、本製品が正常、かつ安全に作動することを確認してください。
- ! 本製品を長期にわたり使用いただくため、定期的に汚れ等を拭きとってください。その際、シンナー系、ベンジン、除光液、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、アルコールを含んだ製品でのお手入れはしないでください。
- ⊗ ビニール製品や壁紙に長時間接触させないでください。色移りする場合があります。

電動機器の警告事項

—— 本製品は A C 100V 電源を使用します ——

! 警告


- ! 使用後は必ず電源が OFF になっているか確認し、専用 A C アダプターをコンセントから抜いてください。
- ! 使用しないときや、雷が鳴り出したときには、直ちに使用を中止し、専用 A C アダプターをコンセントから抜いてください。故障や感電・漏電・発火の原因になります。
- ! 停電のときには直ちに使用を中止し、電源を OFF にして、専用 A C アダプターをコンセントから抜いてください。
- ! 専用 A C アダプターは最後まで確実に差し込んでください。差し込まないと感電・ショート・発火の原因になります。
- ⊗ 直射日光の当たる場所や湿気の多い場所、熱器具の近く、屋外には設置しないでください。故障や感電・漏電・発火の原因になります。
- ⊗ 室温が 10℃ 以下・35℃ 以上の状態では使用しないでください。
- ⊗ 本製品にタオルや毛布などをかけた状態で通電させないでください。故障や発火の原因になります。
- ⊗ 本製品を水またはほかの液体に浸したりしないでください。また、お風呂場などの湯気・湿気の多い場所での使用・保管はしないでください。故障や感電・漏電・発火の原因になります。
- ! コンセントから専用 A C アダプターを抜き差しするときには、絶対に濡れた手で触ったり、コードを引っ張ったりしないで、必ずプラグ部をつかんでコンセントから抜いてください。また電源コードやプラグが傷んだり、差込がゆるんで状態のままでの使用はしないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。
- ! 本製品を落下や冠水させて破損した場合、絶対に使用しないで弊社カスタマーサービス課にご連絡ください。
- ! 本製品に故障や破損など異常が発見された場合には、直ちに使用を中止し、専用 A C アダプターをコンセントから抜いてください。
- ⊗ 本製品の分解・改造は行わないでください。故障や、感電・漏電・発火の原因になります。修理につきましては、まず弊社カスタマーサービス課までご連絡ください。
- ! 専用 A C アダプターが破損した場合には、弊社カスタマーサービス課までご連絡ください。弊社以外での修理は行わないでください。
- ! 本製品が故障した場合には、勝手に修理などせず、弊社カスタマーサービス課に連絡してください。
- ! A C アダプターは、指定された付属の専用 A C アダプターを使用してください。

安全のため必ず守っていただくこと
警告・注意事項


各部の名称

梱包をあけましたら電源を入れる前に、必ず付属品が揃っているかご確認ください。

■ 本体名称

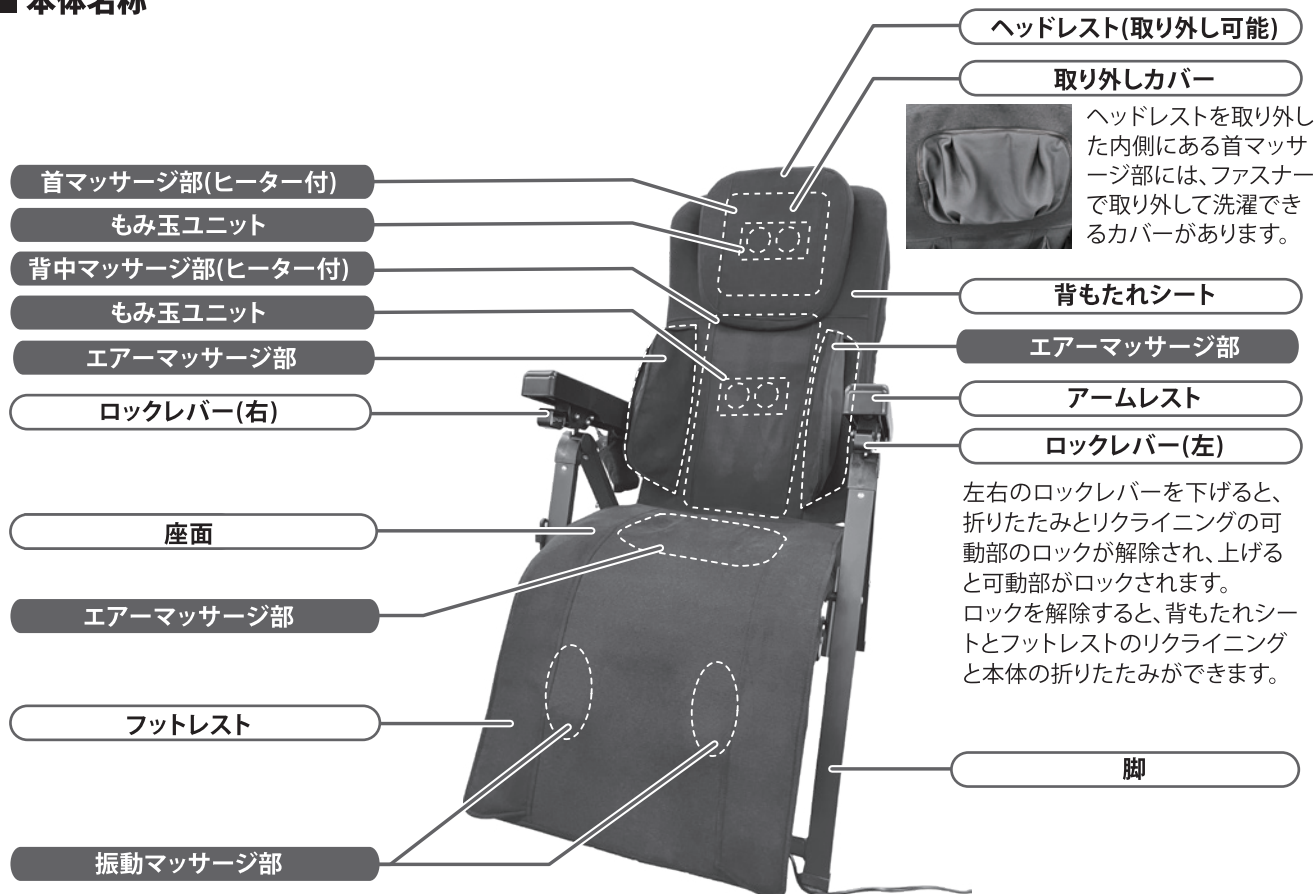

■ 本体右側面

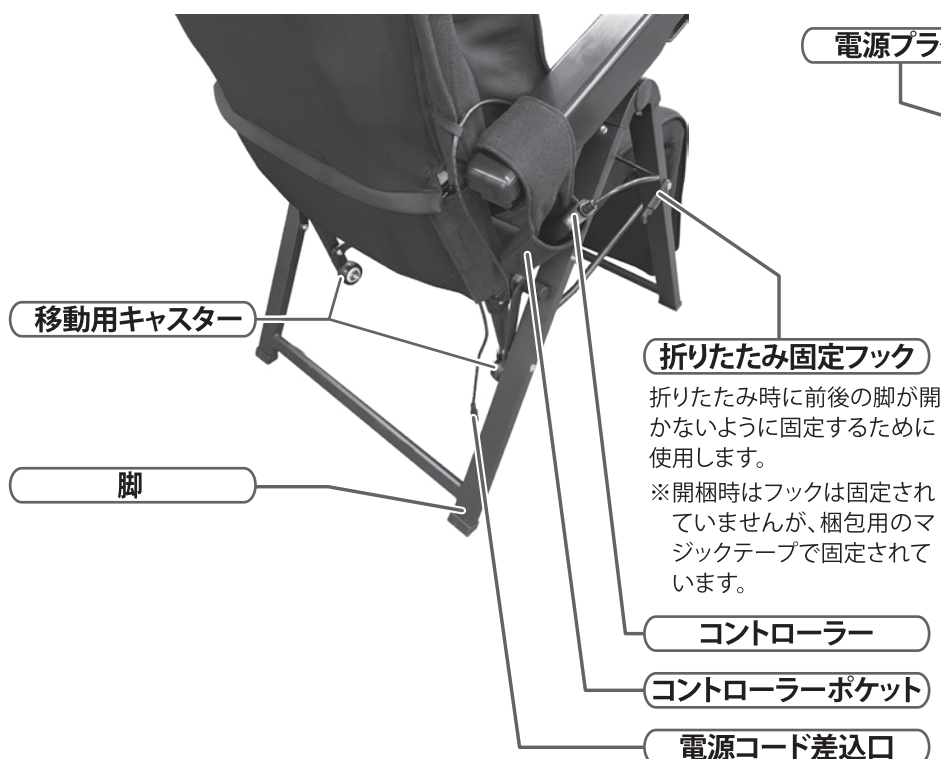

■ 付属品 ※付属品以外は使用しないでください。

専用ACアダプター



各部の名称

■コントローラー

電源ボタン

停止中にこのボタンを押すと、電源がONとなり(白色LED点灯)、モード1、エアー弱、背中マッサージ(全身)で動作を開始します。作動中にこのボタンを押すと、電源がOFFになりもみ玉が初期位置に移動します。(白色LED点滅→消灯)

モードボタン

【モード1ボタン】を押すと、15分間の【疲労回復コース】が作動します。(白色LED点灯)

【モード2ボタン】を押すと、15分間の【やすらぎコース】が作動します。(白色LED点灯)

【クイックボタン】を押すと、5分間の【クイックコース】が作動します。(白色LED点灯)

首もみ玉位置(▲)(▼)ボタン

首もみ玉の位置を調節します。

【首もみ玉位置(▲)ボタン】を長押しすると首もみ玉が上方向に移動します。

【首もみ玉位置(▼)ボタン】を長押しすると首もみ玉が下方向に移動します。

ヒーターボタン

ヒーターのON(赤色LED点灯)・OFF(赤色LED消灯)を切り替えます。

振動ボタン

振動のON(白色LED点灯)・OFF(白色LED消灯)を切り替えます。

全停止ボタン

作動中にこのボタンを押すと、全ての動作を停止します。(マッサージを急停止させたいときに押してください。)
全停止状態になるとコントローラーの全てのLEDが点滅状態になります。
全停止状態で【電源】ボタンを押すと、もみ玉が初期位置にもどり、電源がOFFになります。

首マッサージボタン

首マッサージの作動/停止と正転/反転を切り替えます。

→【首マッサージ(正転)作動開始】(白色LED点灯)
↓
→【首マッサージ(反転)に切り替え】(白色LED点灯)
↓
→【首マッサージ停止】(LED消灯)

背中マッサージボタン


背中のもみ玉マッサージの作動と可動域(全身/上部/下部)を切り替えます。

→【背中マッサージ(全身)】(白色LED点灯)
↓
→【背中マッサージ(上部)】(白色LED点灯)
↓
→【背中マッサージ(下部)】(白色LED点灯)

エアーボタン

エアー強度を切り替えます。

→【弱】(白色LED点灯)
↓
→【中】(白色LED点灯)
↓
→【強】(白色LED点灯)
↓
→【停止】(LED消灯)

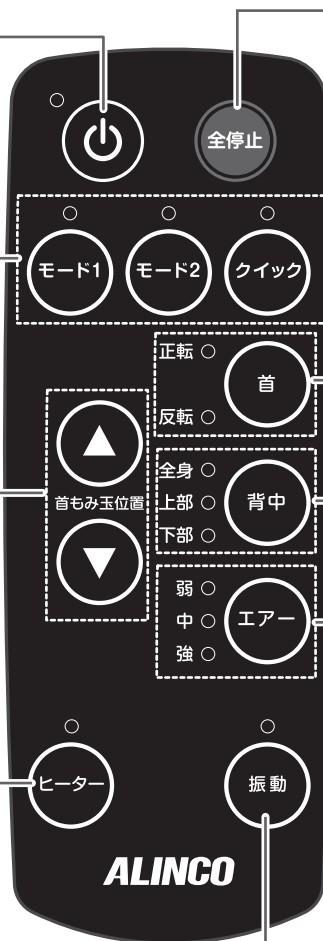

■使用目的・効能または効果と特長について

使用目的・効能または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用するこ。


- 疲労回復
- 筋肉の疲れをとる
- 神経痛・筋肉痛の緩和
- 血行をよくする
- 筋肉のコリをほぐす

特長

- 首・肩からふくらはぎまでマッサージすることができます。
- リクライニングすることができます。

■本体の設置場所を決める

リクライニングしたときに、本体は後ろに50cm、フットレスト部分は前方に27cm伸びます。リクライニングできるように、前方、後方に十分なスペースを確保し、水平なところに設置してください。

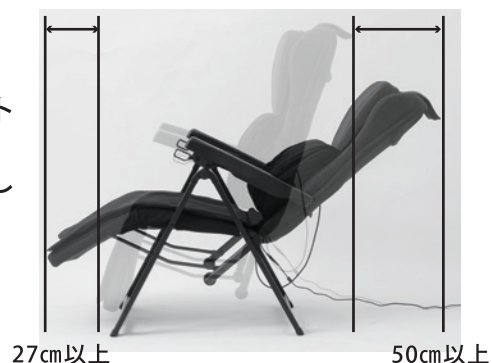

⚠ 注意

- 床やたたみなど、設置場所によっては設置跡や傷がつくおそれがあります。必要に応じ、床表面に本製品が直接当たらないよう、マットなどを敷いてください。
- 固く水平で安定した場所に設置してください。不安定な場所に設置すると、本製品が倒れ、事故やケガ、故障の原因になります。
- ストーブなどの近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しないでください。またホットカーペット等の暖房器具の上で使用しないでください。火災の原因になります。
- 浴室などの湿気の多い場所、屋外などでは使用しないでください。感電や故障の原因になります。
- 直射日光が毎日長時間あたるところや、暖房器具の近くなど、高温になるところへの設置は避けてください。本製品や付属品が変色したり、変質するおそれがあります。

■本体を設置する

⚠ 注意

- 重量物ですので、移動時には十分ご注意ください。
- 人や物を乗せて移動しないでください。故障やケガのおそれがあります。
- キャスターで本製品を移動する際は、周囲の障害物を取り除き、マットなどを敷いてから、ゆっくりと移動してください。床やたたみ、周囲の家財などを傷つける原因になります。
- 持ち上げて移動する際は、必ず2人以上で運んでください。

■キャスターで移動する

本体を折りたたんで固定フックで固定した状態で、背もたれを右の画像のように持ち、背もたれを手前に倒して本製品の脚を浮かせます。その状態でゆっくりとキャスターを転がしながら脚の方向へ移動してください。その際、背もたれを倒しすぎないようにご注意ください。設置場所に移動したら、足元に十分注意し、ゆっくりと下ろしてください。

※キャスターで本製品を移動する時には、周囲の障害物を取り除き、マットなどを敷いてから、ゆっくりと移動してください。床やたたみ、周囲の家具などを傷つける原因になります。


※移動させる際は必ず折りたたみ固定フックで脚を固定してください。




本体の開き方、折りたたみ方

■本体の開き方

1. 折りたたみ固定フックを外します。
2. 左右のロックレバーを下げてロックを解除します。
3. 前方の脚を少し浮かせ、アームレストと背もたれ部分を持って外側に開きます。

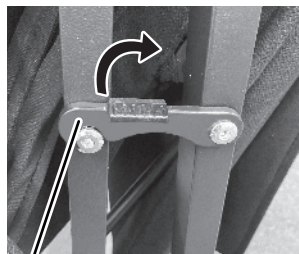

折りたたみ固定フック

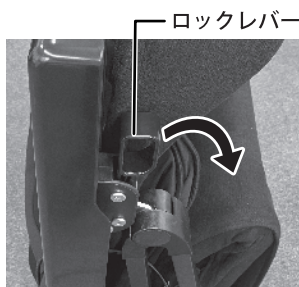

※必ず左右のロックレバーのロックを解除してください

※可動部への指はさみに注意してください。



4. 左右のロックレバーを上げてロックします。




■本体の折りたたみ方


1. 左右のロックレバーを下げてロックを解除します。
2. 前方の脚を少し浮かせ、アームレストと背もたれ部分を持って内側に閉じます。



3. 左右のロックレバーを上げてロックします。
4. 折りたたみ固定フックで固定します。

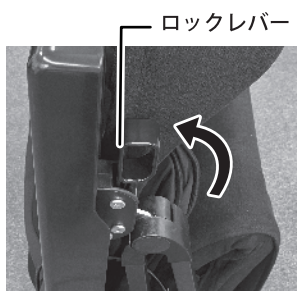

※必ず左右のロックレバーをロックしてください。

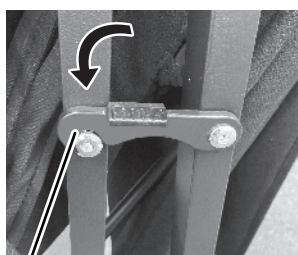

折りたたみ固定フック


本体の開き方、折りたたみ方、リクライニング方法

リクライニング方法


■リクライニングする

1. 本体に座り、左右のロックレバーを下げてロックを解除します。
2. 背もたれに体重をかけると、背もたれが後方にリクライニングし、フットレストが上がりますので、好みの角度で調節してください。

※背もたれはゆっくり倒してください。

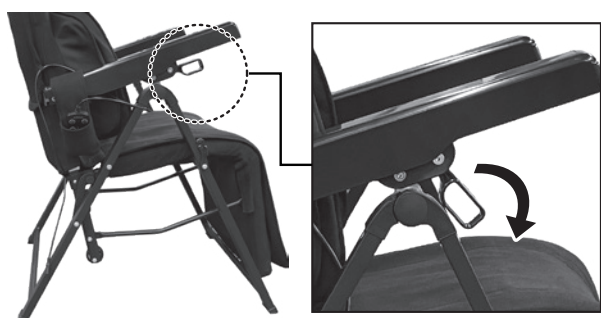


3. リクライニングの角度が決まったら、左右のロックレバーを上げてロックします。

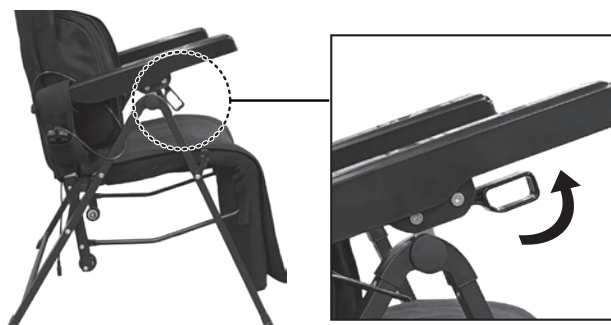


■リクライニングを元に戻す

1. 左右のロックレバーを下げてロックを解除します。
2. 背もたれから背中を離すと、背もたれが前方にリクライニングし、フットレストが下がります。

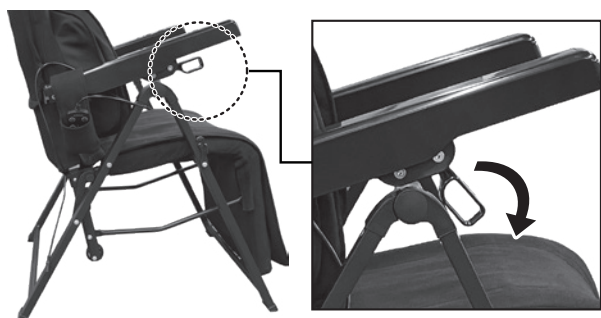


3. 背もたれとフットレストが元の位置に戻ったら、左右のロックレバーを上げてロックします。

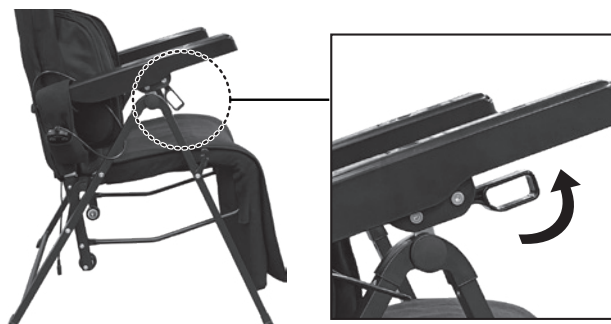

ご使用方法

1. 使用前の確認


周囲（本体の後部、全部、側部、下部など）に人やペット、物がないことを確認してください。

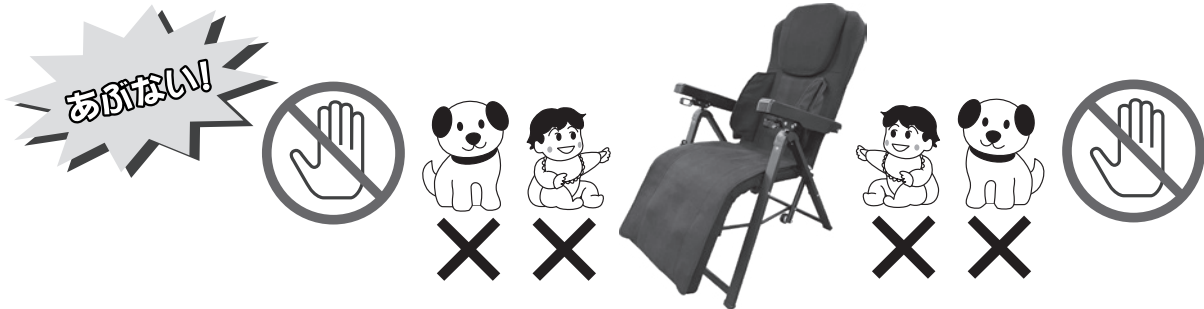

2. 専用ACアダプターのコネクタを接続する

●本体側電源コード差込口 ●専用ACアダプター側コード

まっすぐ根元まで接続してください。

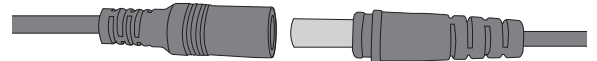

3. 専用ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込む

4. 首マッサージ部のもみ玉の位置を調節する

首マッサージをおこなう場合は、停止中にヘッドレストを外し、
【首もみ玉位置ボタン▲/▼】を長押しすると、もみ玉の位置を調節できます。

※もみ玉位置を調整するときは、ヘッドレストを外して首もみ玉に
けい部を合わせ、深く腰かけてゆっくりもたれてください。

※背の高い人は上に、背の低い人は下に設定してください。

もみ玉




5. ①【電源ボタン】を押してマッサージを開始する

コントローラーの電源ボタンを押すと電源がONになり、モード1、背中マッサージ全身、エアー弱で動作開始します。

【電源ボタン】LED点灯



【モード1ボタン】LED点灯

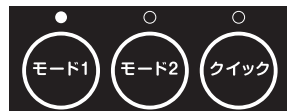

【背中ボタン】全身LED点灯



【エアーボタン】弱LED点灯



6. ②【首ボタン】を押して首マッサージの回転方向とON・OFFを切り替える

動作中にコントローラーの【首ボタン】を押すと、首マッサージの作動と正転・反転を切り替えます。

※首マッサージは、背もたれに面ファスナーで取り付けられているヘッドレストを外すことで使用できます。



7. ③【モード1ボタン】、【モード2ボタン】、【クイックボタン】を押してモードを切り替える

動作中に【モード1ボタン】、【モード2ボタン】、【クイックボタン】を押すと、各モードに切り替わります。

モード1
疲労回復コース
15分タイマー

モード2
やすらぎコース
15分タイマー

モード3
クイックコース
タイマー5分

ご使用方法


8. 【背中ボタン】を押して背中のもみ玉マッサージを切り替える

動作中にコントローラーの【背中ボタン】を押すと、背中のもみ玉マッサージの可動域を「全身/下部/上部」を切り替えます。




9. 【エアーボタン】を押してエアーのON/OFFと強さを切り替える

動作中にコントローラーの【エアーボタン】を押すと、エアーの強さ弱/中/強とON/OFFを切り替えます。

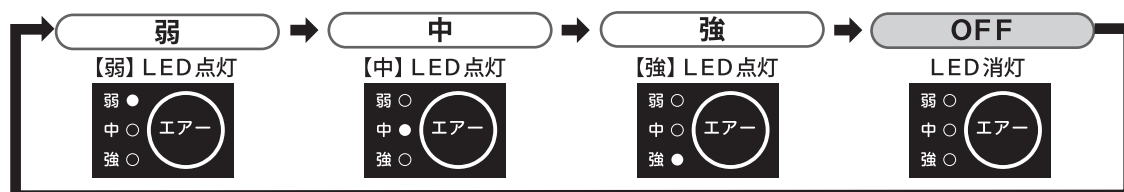


10. 【ヒーターボタン】を押してヒーターのON/OFFを切り替える

動作中にコントローラーの【ヒーターボタン】を押すと、ヒーターのON/OFFを切り替えます。
※ヒーターは首と背中のもみ玉作動時のみ機能します。

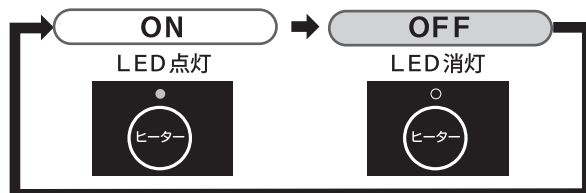

11. 【振動ボタン】を押して振動のON/OFFを切り替える

コントローラーの【振動ボタン】を押すと、振動のON/OFFを切り替えます。

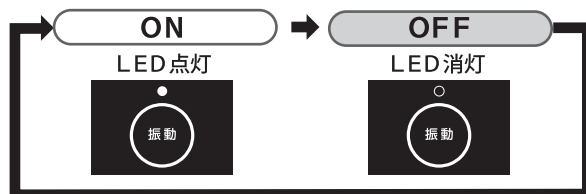

12. 【電源ボタン】を押してマッサージを終了する

コントローラーの【電源ボタン】を押すと、もみ玉が初期位置に移動し（電源ボタン上のLEDが点滅）、もみ玉が初期位置に戻ったら電源がOFFになります（電源ボタン上のLEDが消灯）。

13. 専用ACアダプターの電源プラグをコンセントから抜く

お手入れ方法など

■本体のお手入れ方法（本製品を長期にわたりご使用いただくため、定期的に汚れなどを拭きとってください）

- お手入れの前には、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品を長期にわたり清潔・快適にお使いいただくため、定期的に汚れなどを拭き取ってください。また、汚れなどが落ちない場合は、中性洗剤のうすめ液で拭き取ってください。このとき、シンナー系や強い酸性の洗剤でのお手入れはおやめください。シミや変形の原因になります。



！ 注意

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

■保管および廃棄について

- 子供の手の届くところに置かないでください。
- 温度、湿度の高いところや、直射日光の当たるところに置かないでください。
- 廃棄は必ず各自治体の取り決めに従ってください。

■取り外しカバーのお手入れ方法

- 取り外しカバーが汚れた場合は、本体から取り外し洗濯ネットに入れてぬるま湯で洗濯してください。
※取り外しカバーに付いている洗濯絵表示に従ってお手入れしてください。

洗濯表示



洗濯ネット使用

故障かな？と思う前に 下記の項目を一度チェックしてください。

症 状	チェック箇所
●動かない	→ ○電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？ ○長時間の使用で本製品が熱くなっていますか？ （1時間程度時間を置いて本体内部の温度を下げた後から使用してください。）
●停止する	→ ○無理な力をかけていませんか？ モーターロックによって安全装置が働いた場合は、一度電源をOFFにして、1分程度待ってから再度電源をONにしてください。 ○開始後15分(クイックモードは5分)が経過していませんか？ 自動タイマーが作動しています。
●停止しない	→ ○電源ボタンを押しても、もみ玉はすぐには止まりません。 もみ玉が初期位置(一番下)に戻ってから自動停止します。

※確認後なお、異常が解決しない場合は、直ちに使用を中止し、事故防止のため必ず弊社カスタマーサービス課にご相談ください。

お問い合わせは カスタマーサービス課  0120-30-4515 FAX: 072-678-6410

受付時間 10:00～12:00、13:00～16:00（土・日・祝祭日、弊社休業日を除く）

故障かな？と思う前に
お手入れ方法など

■製品仕様

管 理 医 療 機 器		製 品 サ イ ズ	W600×D630×H1,200mm /
一 般 的 名 称	家庭用電気マッサージ器		(リクライニング最大時) W600×D1,400×H900mm
販 売 名	マッサージチェア 2025	折りたたみサイズ	W600×D360×H1,060mm
品 番	MSC2025	電 気 定 格	AC100V 50-60Hz
製 造 販 売 業 者	アルインコ株式会社	消 費 電 力	60W(電熱部15W)
住 所	大阪府高槻市三島江1-1-1	定 格 時 間	15分
生 産 国	中国	主 な 材 質	本体 : スチール、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン 共重合合成樹脂)
認 証 番 号	307AHBZX00025000		カバー : ポリエステル、ポリウレタン
製 品 質 量 (重 量)	約19kg (ACアダプター含む)		

修理・
アフターサービスの
ご案内

 **アルインコ株式会社**
フィットネス事業部 カスタマーサービス課
フリーダイヤル  **0120-30-4515**

受付時間 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 16:00 (土・日・祝祭日、弊社休業日を除く)

※故障や異常が発生した場合、まずは本書P10「故障かな?と思う前に」をご確認ください。

左記以外受付

F A X : 072-678-6410

E-mail: fcs-syuuri@alinco.co.jp

F A X又はメールでのお問い合わせの場合、回答に時間を要する場合がございます。予めご了承ください。

MSC2025: この商品のWEBページはこちら

